

Refrest

EMS Head SPA


取扱説明書 兼 保証書

家庭用



Li-ion

廃棄する際は
お住いの自治
体のルールに
従ってください

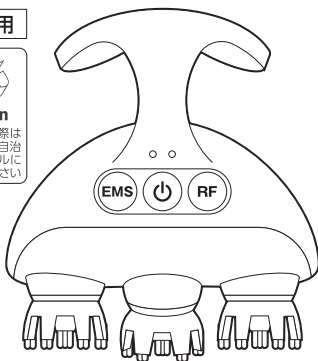

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。また、使用する前は必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合がございます。

もくじ

●安全上のご注意	3
●同梱品の確認	13
●各部名称	14
●充電方法	16
●ご使用前に	18
アタッチメントの交換	18
運転モードについて	20
お肌へのプレテスト	21
●ご使用方法	23
頭皮、顔のケア	23
洗顔での使用	28
●お手入れ	29
●こんなときは	30
●保管するときは	32
●製品仕様	33
●アタッチメント(消耗品)のご購入は	33
●無料保証規定	34
●保証書	巻末

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく内容を示しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害を負ったり財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない
禁止の行為です。



必ず実行していただく
強制の行為です。

⚠ 危険

使用の禁止

- **医用電気機器を使用している場合、本製品を使用しない。**

医用電気機器の誤動作の原因となり、重大な健康障害を引き起こす危険があります。医用電気機器とは以下のようなものを意味します。

- ペースメーカーなどの体内植込／埋込式電子機器
- 人工心肺などの生命維持用電子機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

- **乳幼児・小児や自ら意思表示できない方への使用はしない。**

- **心臓病・脳・神経系疾患等の診断を受け、日常の運動を制限されている方は使用しない。**

- **妊娠中・生理中の方は使用しない。**

肌トラブルや重大な健康障害・死亡事故の危険があります。

警告

指定部位以外への使用の禁止

- 取扱説明書で指定された部位以外へは使用はしない。

事故や症状の悪化の原因となります。特に下記の部位には使用しないでください。

○傷や傷跡・皮膚炎・筋肉の炎症・湿疹・にきび・化膿・過度な日焼け等のある部位周辺
 ○眼球・まぶたやその周辺 ○口唇・口腔内
 ○鼻、耳 ○喉仏 ○ふくらんだほくろ、ウイルス性のイボ ○陰部・粘膜 ○手術をした部位周辺 ○体内に金属・シリコンを埋め込んである部位周辺 ○心臓の周辺 ○生理中の腹部 ○脱毛等の処理をした部位(処理当日) ○その他痛みやかゆみのある場所



医療上の注意

- 下記にあてはまる方は使用前に医師の診断を受ける。


症状の悪化の原因となります。また、下記にあてはまらなくとも、使用に不安のある方や病気治療中の方は医師と相談のうえ使用を判断してください。

○過去にマッサージ(EMS含む)でトラブルのあった方 ○皮膚疾患のある方 ○出産直後の方



(次ページへ続く)

	<p>(前ページより続き)</p> <p>○骨折や整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方 ○シリコンにアレルギーがある方、その疑いのある方 ○敏感肌の方 ○内臓疾患のある方 ○知覚障害のある方 ○発熱しているなど、体調がすぐれない方 ○悪性腫瘍のある方 ○感染症に罹患している方 ○骨折・骨粗鬆症など、骨に異常のある方 ○出血性疾患など血液に異常のある方 ○高血圧の方 ○疲労が強い方 ○眠気を伴う薬を服用中の方、その他強めの副作用を伴う薬を服用中の方</p>
	<p>●使用中に身体の異常や不快感を感じたら使用を中止する。</p> <p>そのまま使用を続けると健康被害の原因となります。使用を中止し、医師とご相談ください。</p>


感電・発火等の事故への注意

	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体・充電台の通電部に金属やごみを付着させない。 感電や故障の原因となります。 ● 充電台に水をかけたり、浴室や洗面台のそばなどで保管・充電しない。 充電台は防水仕様ではありません。感電や故障の原因となります。 ● 本体を水没させない。 本体は防水仕様ですが、完全に水没させたり、水没させた状態やシャワーをかけながらの動作はさせないでください。感電や故障の原因となります。
---	--

感電・発火等の事故への注意

	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体・充電台を高温多湿になる場所や火気のそばで使用・充電・保管しない。 発熱・発火・爆発の危険があります。 ● 本体・充電台に異常がある場合は使用しない。 本体・充電台に変形や破損、異常な発熱や発火・異臭がある場合には使用を中止（充電中はケーブルを充電台から外し、本体を充電台から外す）してください。その後も使用はせず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体を使用しない場合や清掃時には、必ず電源をOFFにし、充電台からUSBケーブルを外す。 感電や発熱・発火・故障の原因となります。

目的外使用の禁止

	<ul style="list-style-type: none"> ● 身体各部のケア用途以外への使用はしない。 取扱説明書記載の用途・用法に従って使用してください。事故や故障の原因となります。 ● 動物への使用はしない。 事故や故障の原因となります。 ● 業務用での使用はしない。 本製品は家庭用です。
---	---

廃棄時の注意



- **本体を火中に投じない。**

爆発の危険があります。

本製品は充電電池を内蔵しています。廃棄の際は、お住まいの自治体のルールに従い、適切に処理してください。

改造の禁止



- **本体・充電台を分解・改造しない。**

感電や故障の原因となります。故障の際はお客様ご自身で修理を試みず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

- **本体・充電台に異物を入れない。**

感電や故障の原因となります。

充電時の注意



- **浴室では充電しない。**

感電や火災の原因となります。充電は必ず水に濡れない場所で行ってください。

- **充電台やUSBケーブル、コンセントには濡れた手で触れない。**

感電の原因となります。

- **USBケーブルを束ねたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたまま充電しない。**

異常な発熱・発火・断線の原因となります。

充電時の注意



- 本体・充電台に、強い力をかけたり、重いものを載せない。

故障の原因となります。



- 充電時に本体や充電台が濡れていないか確認する。

感電や発火の原因となります。

- USBケーブルの端子部分や充電台側の差し込み口に異物の付着がないか確認する。

異常な発熱・発火や故障の原因となります。

- 充電は本製品付属の充電台を使用する。

感電や故障の原因となります。

- 充電に使用するUSBケーブルは規格に準拠したものを使用する。

正常に充電できない可能性があり、感電や故障の原因となります。また、被膜が破れていたり、断線の疑いのあるケーブルは使用しないでください。

※ 付属のUSBケーブル以外を使用して故障した場合は保証対象外となります。

- USBケーブルの抜き差しはコネクタ部を持って行う。

感電や断線の原因となります。

- 充電完了後はすみやかにUSBケーブルを外す。

異常な発熱・発火や故障の原因となります。

注意

使用上の注意

- 必要以上に肌に強く押し当てたり、同じ場所に長時間使用したり、早く動かさない。

けがや皮膚トラブル、本体の故障の原因となります。

- サウナ・温泉・入浴剤の入ったお湯では使用しない。

本体の動作不良や変色・変質・故障の原因となります。温泉や入浴剤入りのお湯が付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

- ご使用の際、オイルやスクラブなど、刺激性のあるものは使用しない。

皮膚トラブルの原因となります。

- 植毛や部分かつら(貼り付けや編み込み等)を使用している部位には使用しない。

巻き込みにより植毛部がダメージを受けたり、頭髪や頭皮トラブルの原因となります。

- 本体動作中にアタッチメントのすきまに指を入れない。

けがや本体の故障、アタッチメントの破損などの原因となります。

- 着衣の上から使用しない。

着衣の破損や汚れの原因となります。
(アタッチメントの素材にカーボンが入っているため、使用時、肌や衣服に黒い汚れが付着することがあります。)

使用上の注意

- **アクセサリ類は外してから使用する。**

けがや皮膚トラブル、本体の故障の原因となります。

- **歯科治療を受けている方は、患部周辺への使用を控える。**

歯の治療中は患部周辺に刺激をあたえると、強い不快感を感じる場合があります。その場合は使用を控え、医師とご相談ください。

- **初めて使用する場合は、必ずプレテストを行う。(21ページ参照)**

プレテスト後にお肌に異常が見られた場合はEMSモードでの使用を控えてください。

プレテスト後に異常がない場合でも慣れるまでの間はEMSや回転速度のレベルを低くして使用してください。

- **アタッチメントは4箇所すべて、同種類のものを取り付ける。**

異なる種類のものを取り付けたり、取り付けていない箇所があると故障の原因となります。

- **使用中は本体が落下しないよう、しっかりと持つ。**

落下によりけがや、本体の故障の原因となります。

- **使用後は毎回必ずお手入れを行い、本体の汚れや水分をしっかりと拭き取る。**

お肌に触れる機器のため、清潔さを保ってください。本体の故障やお肌のトラブルの原因となります。

お手入れ・保管時の注意



- アルコールやベンジン等溶剤、漂白剤などを使用して洗淨しない。

本体の変色・変質・故障の原因となります。

- シャンプー・トリートメント等が付着した場合は、水洗いをする。

本体の変色・変質・異臭の原因となります。



- 充電や保管時は平らで安定した場所に充電台を設置する。

転倒や落下により、けがや故障の原因となります。

- 子どもやペットの手の届かない場所で保管する。


事故の原因となります。

- 長期間保管する場合は高温多湿やほこりの多い場所を避け、箱に収納して保管する。


充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1度テスト動作を行い、充電を行ってください。

同梱品の確認

万一不足・破損している場合は販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

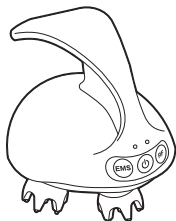

●本体 ×1 個

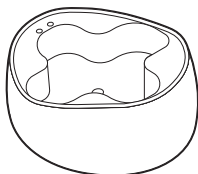

●充電台 ×1 個



●USB ケーブル ×1 本



スカルプ用



フェイス用



洗顔用

●アタッチメント
3種類 × 各4個

※充電用 ACアダプタは付属しません。お客様でご用意ください。
 ※本体は防水仕様ですが、浴槽内での使用、または水没させた状態やシャワーをかけながらの動作はさせないでください。
 ※充電台は防水仕様ではありません。水に濡らさないようご注意ください。

各部名称

本体

電源ボタン

電源ON/OFF (長押し)
アタッチメント回転速度の切替 (短押し)


LEDランプ

各モードの動作時にそのレベルを表示します。

EMS運転時	青色でレベル表示
RF運転時	赤色でレベル表示
充電時	青色で進捗表示

※アタッチメント回転のみ運転時はLEDは点灯しません。

ハンドル

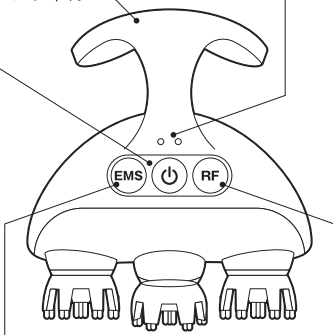

EMSボタン

EMS (電氣的刺激) の開始 / レベル切替をします。
EMSの強度は2段階で選択できます。

RFボタン

RF (温熱) の開始 / レベル切替をします。
RFの強度は2段階で選択できます。

※洗顔用のアタッチメントを装着時はEMS、RFでの運転はできません。

本体(アタッチメント部分)



アタッチメントは消耗品です

使用を続けていると、先端が磨耗していきます。ご使用時に痛みを感じたり、EMSの効果を感じにくい／ピリピリするなどの場合は新品をお買い求めのうえ、交換してください。

アタッチメントは4個すべて同じ種類のを装着してください

※通電部に汚れが付着しているとEMS／RF運転が正常に行なえません。ご使用後はアタッチメントを外し、ブラシなどでお手入れを行ってください。

※洗顔用のアタッチメントには通電部はありません。

充電方法

充電残量が少なくなった時や、はじめてご使用になる時は充電を行ってください。

【充電時間／使用時間の目安】

充電時間	約3時間(5V／1Aの場合)
使用時間	アタッチメント回転のみの場合 :約3時間
	アタッチメント回転+EMSの場合 :約1時間
	アタッチメント回転+RFの場合 :約20分

※EMS、RFご使用時は、使用時間が短くなります。


※充電電池は充電／使用を繰り返すごとに少しずつ劣化していきます。目安の使用時間より短くなる場合がありますが故障ではありません。

※充電用 ACアダプタは付属しません。お客様でご用意ください。

※充電電池は交換できません。

※長期間使用しない場合は 1 か月に 1 度テスト運転し、満充電させてから保管してください。


- 1 充電台を水気のない、安定した場所に設置し、USBケーブル(Type-C)を接続します。

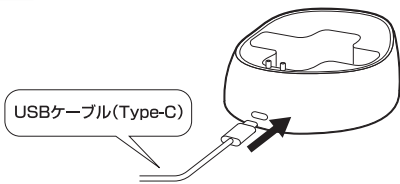


- 2** 充電用 ACアダプタに
USBケーブルを接続し、
コンセントに差し込みます。

充電用 ACアダプタ
※付属しません

1A のアダプタをご用意ください。パソコンの USBポートでは充電できない場合があります。

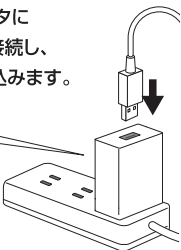

- 3** 本体が濡れている場合は水気を拭き取り、
充電台の上に置きます。

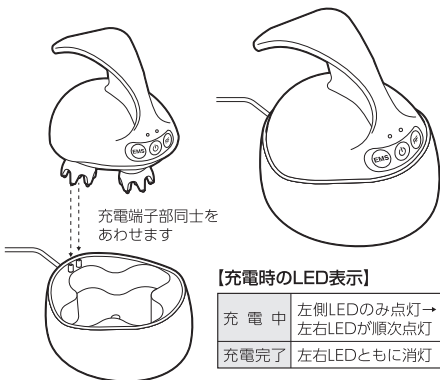


- 4** 充電完了後、充電用 ACアダプタ、
USBケーブルを外します。

ご使用の前に

ご使用前に、本体や付属品に傷・凹み・ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。

アタッチメントの交換

本製品には3種類のアタッチメントが付属しています。使用する部位や用途にあわせて交換してください。

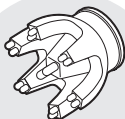

スカルプ用

頭皮ケアに



フェイス用

顔や首、デコルテのケアに


この2つのアタッチメントでは、EMSモード／RFモードでの運転が可能です。



洗顔用

このアタッチメントは洗顔時に使用します。EMSモード／RFモードでの運転はできません。

取り外す際は、アタッチメントを指でつまみ、少しだけ斜めにねじりながら引き抜きます。

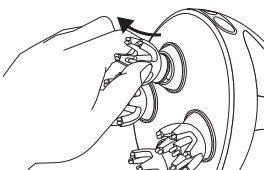

取り付ける際は、まっすぐ奥まで差し込んでください。傾いていると通電部同士が接触せず、EMSモード／RFモードが正常に運転できません。



※アタッチメント交換時にアタッチメントを破損しないようご注意ください。また、指を挟まないようご注意ください

※アタッチメントにはEMS(電氣的刺激)やRF(温熱)モードで通電を行うため、導電性の素材としてカーボンが含まれています。そのため、ケアの際に黒い汚れがお肌にうつることがあります。その際は、流水で洗い流すか、ウェットティッシュなどで拭き取ってください。

※着衣の上からは使用しないでください。アタッチメントの汚れがうつったり、巻き込んで破れる恐れがあります。

運転モードについて

EMS (電氣的刺激)

電気により筋肉を刺激します。
EMSレベルは2段階で選択できます。

RF (温熱)

アタッチメントが発熱し、接触部位を温めます。RFレベルは2段階で選択できます。

EMSとRFは同時に使用できません。

【EMSモードの注意点】

アタッチメントの先端からお肌を通じて筋肉へ刺激を与えます。

お肌が乾燥した状態では十分に通電させることができません。EMSモードで使用時は、**水やお湯、化粧水やゲルなどでお肌を十分に湿らせてください。**

入浴時、頭皮ケアをする場合は髪にシャンプーをつけて泡立てた状態でのご使用をおすすめします。




その後、アタッチメントをしっかり頭皮に押し当てるとEMSの刺激を感じやすくなります。

乾いた状態でもEMSを使用することはできますが、刺激は感じにくくなります。

※EMSの刺激の感じ方には個人差があります。また、使用部位でも異なります。

アタッチメントにはそれぞれ電気的な極性があり、4つのアタッチメントが同時にお肌に触れていないとEMSの刺激が正常に伝わりません。

EMSモード使用時はご注意ください。

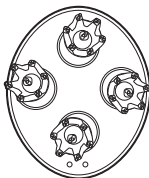
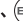


お肌へのプレテスト

EMS使用后、まれにお肌にトラブルが生じる場合があります。本格的な使用の前に、プレテストを行ってください。


- 1 腕の内側を石鹸を用いて洗い、そのままお肌を湿らせておきます。

※お肌が湿っていないと十分に刺激が伝わりません。
アタッチメントは「スカルプ用」をセットします。


- 2 本体の  ボタンを長押しします。
その後、 ボタンを1回押します。


EMSモード レベル1 (弱めの刺激) で運転します。

※LEDランプが1つだけ、青色に点灯したことを確認してください。

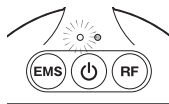

3 腕の内側へ、 1分程度使用してください。

少しずつ場所をずらしながら、軽く押し当てます。使用後は、 ボタンを長押しし、運転を停止します。

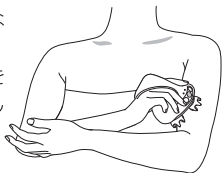

4 24時間、 お肌の様子をみてください。

一時的に赤みがみられることがありますが、時間がたつと薄くなる場合は使用に問題はありません。

赤みが消えなかったり、かゆみやその他の異常がみられる場合は、EMSモードでの使用を控えてください。

ご使用方法

頭皮、顔のケア

1 使用部位にあった アタッチメントをセットします

頭皮のケアには「スカルプ用」、顔のケアには「フェイス用」のアタッチメントの使用をおすすめします。

2 EMSモードで使用する場合、 頭皮・お肌をお湯などで十分に湿らせます


- 頭皮** お湯で髪と頭皮を湿らせます。入浴時に使用する場合はシャンプーを用い、よく泡立てておきます。
- 顔** お湯や化粧水・ゲルなどでお肌を湿らせます。

※スクラブやオイルは使用しないでください。

※RFモード、アタッチメント回転のみで使用の場合、お肌は湿らせる必要はありません。

3 本体を図のように しっかりと持ちます

すべり落ちないように、手につけたシャンプーや化粧水などはよく洗い流してください。

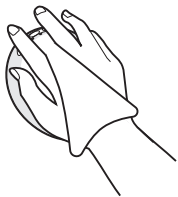

4 本体の ボタンを 長押しします


アタッチメントが回転を始めます。

※運転開始時は、EMSもRFもOFFの状態です。

【アタッチメントの回転速度について】

アタッチメントの回転速度は3段階で調節できます。



 ボタンを短く押すごとに速度が切り替わりま
す。運転開始時は「中速」になっています。

※「低速」は洗顔用アタッチメント装着時のみご使
用ください。

※アタッチメント回転のみの運転時、LEDランプ
は点灯しません。LEDランプはEMS／RFモード
時に点灯します。

※1回の使用時間は10分間です。運転開始後10
分を経過すると自動停止します。

※EMSモードの長時間の使用は避けてください。


※アタッチメント回転のみで使用する場合、次の
「5」の手順はスキップしてください。

5 EMS／RF各モードを 設定します

○EMSモードの場合

ⒺEMS ボタンを押します。LEDランプが青色に点灯し、EMSモードが開始されます。

EMSのレベルは2段階で調節できます。

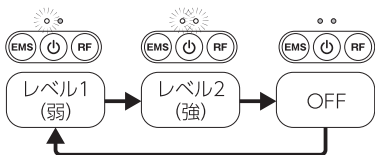


レベルはⒺEMS ボタンを押すごとに切り替わります。

※慣れるまでは「レベル1」でご使用いただき、使用時間も短めにしてください。

○RFモードの場合

ⒻRF ボタンを押します。LEDランプが赤色に点灯し、RFモードが開始されます。

RFのレベルは2段階で調節できます。

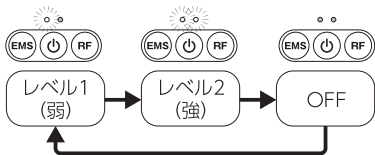

レベルはⒻRF ボタンを押すごとに切り替わります。


6 ケアを行います

○頭皮のケア

- ①はえぎわに数秒間、その場で小刻みに動かしながら、軽く押し当てます。
 - ②そのまま頭頂部へ向け、ゆっくり移動させます。
- ※①～②を各箇所ですら数回ずつ繰り返します。
※強く押し当てず、移動させながらご使用ください。



【前・側頭部】

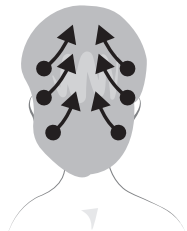

【後頭部】

- ③頭頂部からえりあし方向に、数秒ずつ押し当てながら移動していきます。

※4個のアタッチメントは均等に頭皮に押し当ててください。

※お肌が乾燥しているとEMSの効果が実感しづらくなります。その場合は再度お湯をかけて湿らせてください。

※1回約5分～10分を目安にご使用ください。



【頭頂部】

○顔のケア

EMSモードを含め、ケア使用時は次の場所に当てないようご注意ください。

- 目とその周囲 ○鼻
- 唇 ○耳 ○のど



※回転速度は「中速」をおすすめします。


※顔に使用する際は、メイクを落としてください。

※お肌が乾燥しているとEMSの効果が実感しづらくなります。その場合はお湯などで湿らせてください。

※首筋はEMSの刺激が敏感に感じられる場合があります。はじめて使用する場合は十分にご注意ください。

- ①顔の中心から外側へゆっくりと動かします。

※やさしく当ててください。

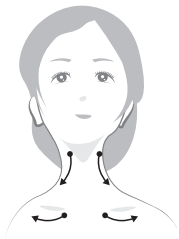

- ②首からデコルテにかけて、矢印の向きにゆっくりと動かします。


※1回約5分～10分を目安にご使用ください。

7 使用後は、 ボタンを長押しし、電源をOFFにします

運転開始後、10分経過すると自動停止します。

シャンプー、洗顔フォームを使用した場合は通常通りに洗い流し、トリートメントなどを行ってください。

使用後は毎回必ず、本体とアタッチメントのお手入れを行ってください。

※EMSモード動作中に  ボタンを押すとEMSモードが終了し、RFモードの運転に切り替わります。逆も同様で、EMSモードとRFモードの同時運転はできません。

洗顔での使用

(洗顔用アタッチメントを使用)

洗顔フォームを顔全体によく泡立てたあと、洗顔用アタッチメントをセットし、やさしくケアを行ってください。

※アタッチメントの回転速度を「低速」にして使用してください。


※洗顔用アタッチメントではEMS/RFモードを使用できません。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源がOFFになっていることを確認してください。

本体の汚れは流水で洗浄してください。

その後アタッチメントを取り外し、本体とアタッチメントの通電部や可動部などを古くなった柔らかい歯ブラシなどを用いて清掃します。

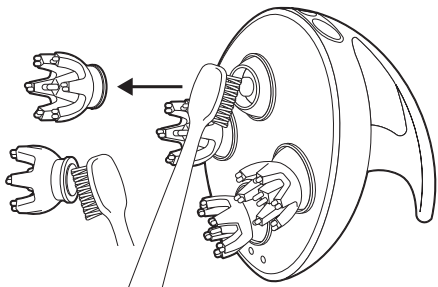

汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。清掃後、流水ですすいでください。

洗浄後は汚れてもよいタオルで水を拭き取り、風通しのよい場所で乾燥させてください。

※直射日光や高温多湿になる場所で乾燥させないでください。

※水洗いした後はドライヤー等を使って本体を乾燥させないでください。

こんなときは

Q: 電源が入らない

A: 本体充電電池残量が低下している可能性があります。充電を行ってください。(16ページ)

A: 起動するには電源ボタンを長押ししてください。

Q: 充電できない

A: 充電ACアダプタとUSBケーブルは正常に接続されているか確認してください。パソコンのUSBポートや1A未満のアダプタでは充電が行えない可能性があります。

Q: EMSモードで使用時、痛みを感じる

A: 首筋など、使用する場所によってはEMSの刺激を強く感じる場合があります。また、刺激の感じ方には個人差があります。赤みが長く残ったり、かゆみや痛みが出る場合には中止し、医師の診断を受けてください。

Q: EMSモードで使用時、刺激が弱い／感じられない

A: EMSは水分を介して電気刺激を伝えます。お肌が乾いた状態ではEMSの刺激が十分に伝わりません。使用前に、お湯や化粧水などで肌を湿らせて使用してください。

A: EMSの効果を出すためには、アタッチメントが4個すべて均等にお肌に触れている必要があります。

アタッチメントがきちんとセットされていなかったり、お肌に当てた際に浮いているアタッチメントがないか確認してください。

- A: 正常に使用していてEMSの刺激が弱くなったり、感じ方が変化した場合はアタッチメントの寿命の可能性がります。新しいアタッチメントをご購入のうえ、交換してください。

Q: 肌に黒い汚れが残る

- A: アタッチメントは導電性をもたせるためにカーボンを含んだ素材を使用しています。そのため、ケア時に黒い汚れが残ったり、水が黒くにごることがありますが、異常ではありません。お肌の汚れは、ケアが終わった後に流水で洗い流してください。

Q: 「低速」で回転が止まる

- A: 「低速」は洗顔用アタッチメント専用です。他のアタッチメントを装着して使用した場合、また強く押し付けた場合は、回転が止まる場合があります。

上記の方法で解決しない場合、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

- アタッチメント以外の部分が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 本体や充電台が部分的に破損・変形している

保管するときは

使用後は毎回お手入れを行い、充電台に置く前に本体とアタッチメントをよく乾燥させてください。

充電台は防水仕様ではありません。充電台内部に水が入ったり、濡れたまま充電を行うと感電や故障の原因となります。

使用しない場合は充電用ACアダプタ、USBケーブルを外してから、高温や湿気の多い場所を避けて保管してください。

長期間保管する場合は、満充電まで充電を行ってから保管してください。また、1か月に1度程度テスト動作を行い、充電を行ってください。放電したままで保管すると充電電池の性能が低下し、充電できなくなる恐れがあります。

●廃棄するときは

本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。廃棄する際はお住まいの自治体のルールに従い、適切に処理してください。

製品仕様

本体サイズ	約117mm(幅)×138mm(奥行) ×118mm(高さ)
本体重量	約344g
主な材質	本体・台座:ABS樹脂、シリコン アタッチメント:シリコン、カーボン、ナイロン
入力	USB Type-C DC5V 1A
バッテリー性能	内蔵リチウムイオン電池 DC3.7V 1400mAh
充電時間	満充電 約3時間
動作可能時間	アタッチメント回転のみ 約3時間/アタッチメント回転 +EMS 約1時間/アタッチメント回転+RF 約20分
使用環境温度	5℃～45℃

アタッチメント(消耗品)のご購入は

アタッチメントは消耗品です。

EMSの刺激が感じづらくなった／ピリピリする／ケア時に痛みを感じるなどの場合はアタッチメントの寿命の可能性がります。その際は、新しいアタッチメントをアデランス公式オンラインショップよりご購入のうえ、交換してください。

※アタッチメントは必ず専用のものでご使用ください。

アデランス公式オンラインショップ
<http://www.aderans-shop.jp>



無料保証規定

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

- 無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただき販売元、またはお客様ご相談窓口までお申し付けください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、凍結などによる故障及び損傷
- 車両、船舶などに放置された場合に生ずる故障及び損傷
- 保証書の写しが添付されていない場合

無料保証規定

- 保証書にお買い上げ販売店より、ご購入年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合

4.保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

本保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、販売元、またはお客様ご相談窓口までにお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

*機器についてご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。

アデランスお客様サービス室

 **0120-03-9696**

受付：月曜～金曜(祝日を除く)10:00～18:30
土日祝日9:00～17:30(年中無休) ※年末年始を除く

- 使い方がわからない ●本機器が動かない
- 本機器を修理したい 等

保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。 **家庭用**

商 品 名	Refrast (リフレスト)
シリアルNo.	
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)
お買い上げ販売 店舗印、または レシート貼り付け	
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様 名	様
ご 住 所	〒 -
電 話 番 号	() -

保証書は取扱説明書の記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、販売元、またはお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。

※シリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

MADE IN CHINA 発売元 株式会社 **アデランス**
東京都新宿区新宿1-6-3